

補聴器をお使いの皆様へ たいせつなお知らせ

注意

汗や湿気は 補聴器の大敵です

汗や湿気などの水分は補聴器の「聞こえに影響」したり「故障の原因」にもつながります。大切な補聴器を長持ちさせるために、正しい補聴器の管理が必要です。

CHECK!

補聴器の管理をしていない。

01

汗や湿気が原因で故障したことがある。

02

汗をかきやすい体質や環境にいる。

03

補聴器の臭いや雑菌が気になる。

04

1つでも
あてはまったら

汗や湿気を
素早くシャットアウト!

電源を入れるだけの簡単操作

補聴器にやさしい熱を使わない乾燥方式
電源が切れても装用するまで効果は持続

クイックエイド
補聴器乾燥器 Quick aid



発売

8周年

クイックエイド
「3つの効果」

スピード
乾燥

クリーン
除菌

パワフル
脱臭

クイックエイドは乾燥から保管までしっかり管理できます！

補聴器乾燥器クイックエイドとは

汗や湿気などで湿った補聴器を**素早く乾燥**させ
補聴器の表面についた雑菌を**キレイに除菌**し
いやな臭いを**強力に脱臭**する補聴器管理に適した商品です。

熱に弱い補聴器のために



クイックエイドは
ヒーターを使わない
乾燥方式


補聴器の管理はこれ1台でOK

クイックエイドは簡単

電源を入れるだけで自動運転 コンセントなら60分、乾電池なら20分で自動電源OFF。

消耗品の交換時期は色でお知らせ 湿度検知紙がピンク色になったら交換時期です。

電池でも使用できるコンパクトサイズのクイックエイドは**持ち運びもらくらく♪**

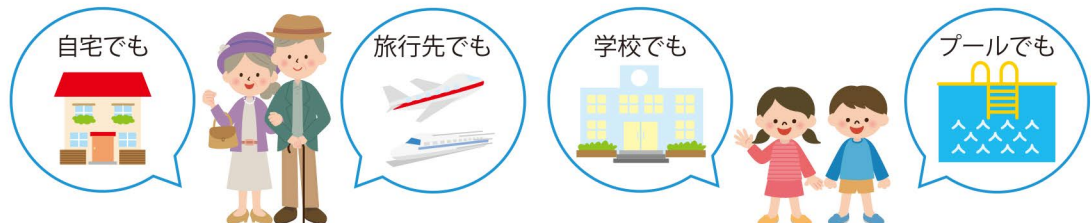

- ケース内循環ファン搭載
- タイマー運転
- 省エネ紫外線LED
- 静音設計
- 簡単開閉
- 電池・ACの2電源方式

製品ラインナップ



QA-221W クリスタルホワイト QA-221BK ロイヤルブラック QA-221L ミントブルー QA-221V プリリアントパープル QA-221G ライムグリーン QA-221P ロゼピンク

希望小売価格	8,080円(税抜7,482円)
外形寸法	クレイドルセット時: 直径74mm × 高さ98mm (本体のみ: 直径74mm × 高さ84mm)
質量	クレイドルセット時: 約225g (本体のみ: 185g)
電源	AC100V 50-60Hz / 単4乾電池 × 2本 (別売) ※アルカリ又はニッケル水素電池をご利用ください
電池寿命	1日1回のご使用で約1ヶ月 (新品アルカリ電池使用時)
OFFタイマー時間	クレイドル使用時: 約60分 / 回, 乾電池使用時: 約20分 / 回
生産国	中国 / 日本 (主要部品: UV-LED, ハイブリッドシート, 特殊乾燥剤, 湿度検知紙)
乾燥方式	ケース内循環ファン + 特殊乾燥剤
除菌方式	紫外線LED + ハイブリッドシート
脱臭方法	ハイブリッドシート
付属品	クレイドル (電源供給装置), ハイブリッドシート, 特殊乾燥剤, 湿度検知紙, 取扱説明書 (各1点)

※QA-221Wクリスタルホワイトのみ本体 (QA-150F:税込5,120円) およびクレイドル (QAC-70:税込2,960円) の単体取扱いがございます。

◆お問い合わせ…

IDEX株式会社

〒231-0058
神奈川県横浜市中区弥生町2-18-1 ロイヤルステージS.T 4F
TEL.045-341-0355 FAX.045-262-1061
<http://www.quickaid.jp/>

●ご使用の際は必ず商品に添付された取扱い説明書をお読みにになり、正しく安全にご使用ください。●製品のデザイン・仕様は改良等により予告無しに変更する場合がございます。●製品の色は印刷の為、実物と異なる場合がございます。●希望小売価格は税込価格で表示しています。●掲載内容は2015年5月現在のものです。